



EMMA Lift

Guide #1




Guide démarrage rapide

Pour plus d'informations voir sur
www.decidelife.fr



DÉBALLAGE DU CHARIOT

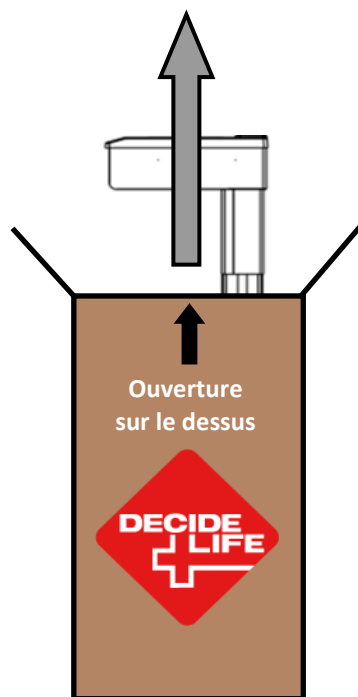

MENTIONS LÉGALES

Propriétaire : Decide Life

Raison Sociale = DECIDE LIFE DISTRIBUTION

Forme juridique = SARL

Adresse de l'établissement = 37 RUE RENE CASSIN-PAE DE LA CHATELAINE-74240 GAILLARD

Adresse mail = emma@decidelife.ch

Numéro de téléphone = 04.50.95.04.68

Numéro d'inscription au RCS = 527 632 046

Droit à l'image : Decide Life est seul propriétaire des images et des machines qui figurent sur ce document. Œuvres, textes, photographies sont protégés par le droit d'auteur et le Code de la Propriété Intellectuelle Française. Toutes les photographies présentes sur ce document ont nécessité des autorisations c'est pourquoi il est impossible d'en faire la copie sans requérir une autorisation au préalable (art L.122-3 CPI).

Protection des données : Toute reproduction engagera des poursuites judiciaires, conformément aux réglementations du RGPD.



DECIDE Life Distribution

23 Rue René Cassin 74240 GAILLARD

Tél : +33 (0) 4 50 95 04 68

Fax : +33 (0) 4 50 35 09 48

emma@decidelife.ch

www.decide-life.com



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES


	E.L 100	E.L 100V	E.L TAB
AUTONOMIE 24V	X	X	X
ALIMENTATION 220V		X	
POTENCE VESA	X	X	X
VERROUILLAGE TABLETTE			X

OPTIONS	E.L 100	E.L 100V	E.L TAB
INFORMATIQUE EMBARQUÉE PCI3	X	X	
INFORMATIQUE EMBARQUÉE MITAC	X	X	
ECRAN TACTILE	X	X	
ECRAN 24 NON TACTILE	X	X	
CLAVIER IP 68 AVEC TOUCH PAD	X	X	
SÉCURISATION TIROIR	X	X	X
BARRE D'ACCROCHE LATÉRALE	X	X	X
TIROIRS	X	X	X


CARACTÉRISTIQUES EMMA	E.L
Dimensions plateau	57x55,5 cm
Hauteur plan de travail	Variable de 80 à 102 cm
Poids chariot (à vide)	35kg

Batterie


Autonomie en pleine utilisation	8H
Cycles	1300

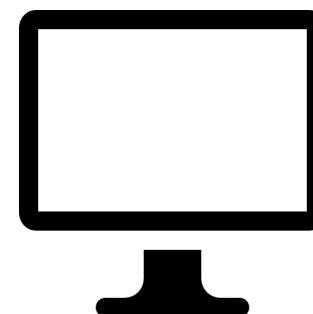

1 écran 24 pouces
(*SELON CONFIGURATION)

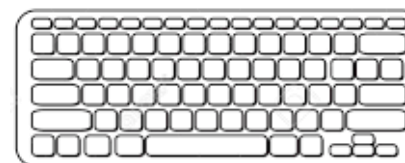

1 clavier et une souris
médicales
(*SELON CONFIGURATION)

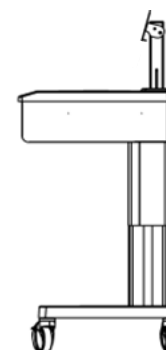

1 chariot Emma lift sans
écran avec potence



1 chargeur batterie 24V

ASSEMBLAGE DU PLATEAU



Attention !!

Pour une installation sûre et correcte du produit, avant toutes opérations, vérifiez que vous vous situez dans un endroit sec et sécurisé.

1

Passer toutes les connectiques dans le corps de potence en le faisant sortir par le haut du corps



Attention à ne pas bloquer ou arracher la connectique en faisant l'assemblage du corps et du mât de potence



imprégné ou lingette toutes les parties sales. Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne. Ne nécessite pas de rinçage à l'eau.

- ◆ Si pas de souillures, nettoyer avec un support coton imprégné ou lingette nettoyante/désinfectante (type « WIP'ANIOS » ou autre). Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne. Ne nécessite pas de rinçage à l'eau.

◆ Nettoyage des roues à faire 1 fois par semaine

- ◆ Retirer les fils ou cheveux enroulés sur les passes fils des roues.
- ◆ Pulvériser un produit nettoyant/désinfectant (type ANIOS « SURFA'SAFE » ou autre). Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne. Frotter avec un support coton imprégné ou lingette les bandes de roulements. Passer une lingette (type « WIP'ANIOS » ou autre) pour éliminer toute trace de salissure.

◆ Nettoyage de l'intérieur du chariot à faire 1 fois par semaine

- ◆ Sortir tous les tiroirs et/ou dossier suspendu du chariot.
- ◆ Retirer tout comprimé ou autre (trombone, papier) tombé dans le fond du chariot.
- ◆ Nettoyer l'intérieur du chariot avec un support coton imprégné ou lingette nettoyante/désinfectante (type «WIP'ANIOS » ou autre). Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne. Ne nécessite pas de rinçage à l'eau.

STOCKAGE

Si vous n'utilisez pas la machine, veillez à ce que celle-ci soit éteinte et déconnectée du chargeur. Faire un cycle de charge tous les 3 mois minimum.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Lisez les instructions de sécurité suivantes avant d'utiliser l'appareil. Il est impératif de suivre les indications précédées du symbole ⚠



POUR TRAVAILLER EN SÉCURITÉ :

- Vérifiez à ne jamais mettre de liquides quels qu'ils soient sur les parties qui se connectent tels que les embouts du chargeur.
- Attention à ne jamais endommager les câbles du chargeur et de la prise secteur, les fils électriques ne doivent pas être apparents.
- Eviter tous chocs violents sur la machine pour garder intact l'intégrité du système.
- Ne pas ouvrir la machine.
- N'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. L'appareil ne doit pas recevoir de fortes éclaboussures ou des projections d'eau.

MAINTENANCE

ENTRETIEN

- ♦ **Nettoyage des zones actives et tactiles (plateau, écran et clavier) après chaque service (matin, midi et soir)**
 - ♦ Si souillures, pulvériser un produit nettoyant/désinfectant (type ANIOS « SURFA'SAFE » ou autre), frotter avec un support coton

2

Assembler le corps de potence et le mât, comme indiqué ci-dessous, en emboîtant le vérin dans son emplacement à gauche



3

Installer le passe-fil



4

Passer le collier de serrage dans la patte prévue à cet effet, sur le support Vesa en incluant les câbles



5

Tirer la bonne longueur des câbles à connecter à l'écran




6

Serrer le collier après avoir fixé l'écran (voir suite) pour vérifier la bonne longueur des câbles



3


Appuyer sur le bouton d'alimentation, sous le cadre, à gauche du chariot

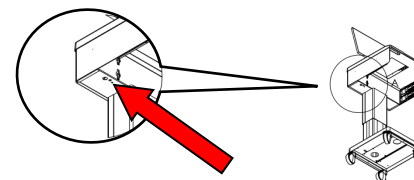

L'Emma Lift est prête à l'utilisation

2

1. Fixation du chargeur, voyants vers le haut, sur le mur, proche de la prise secteur
2. Relier le chariot au chargeur
3. Brancher le chargeur à la prise secteur

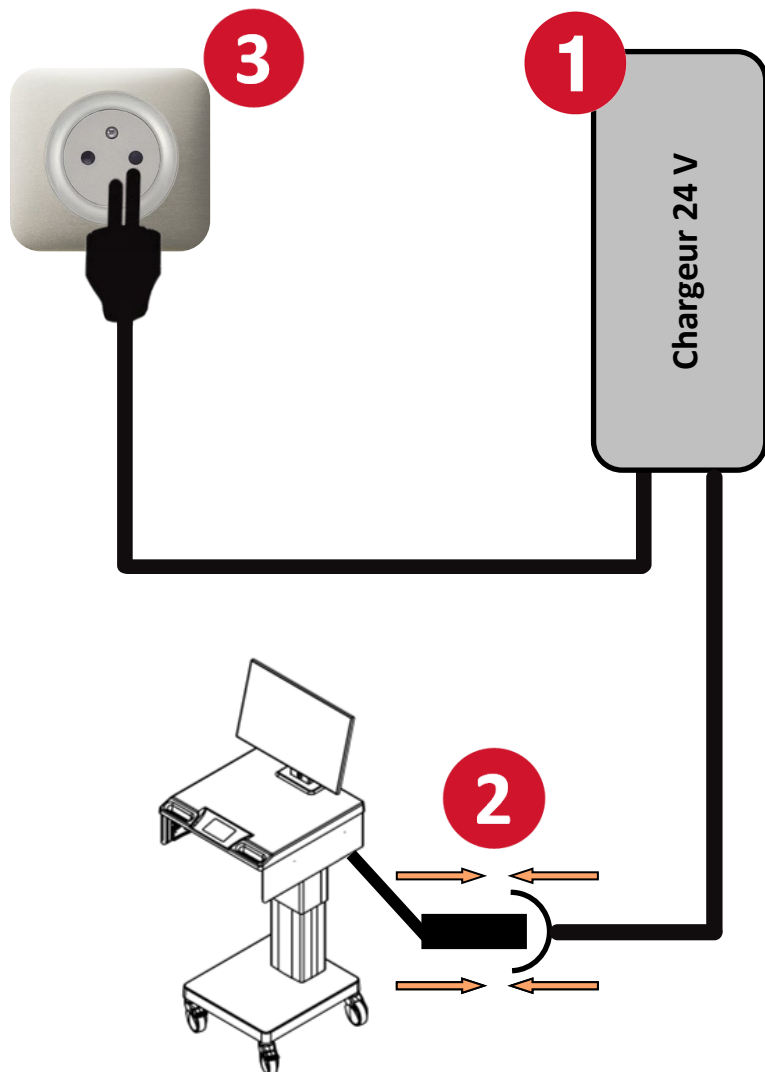


*OPTIONS

FIXATION DE L'ÉCRAN

1

Positionner le support Vesa à l'horizontal

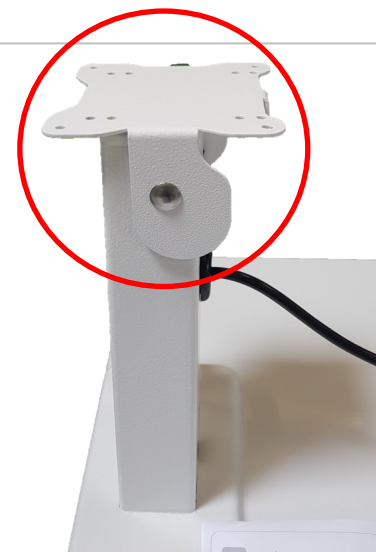

2

Fixer d'abord les deux vis du bas de l'écran selon la configuration de votre écran (VESA 75 ou 100)



3

Remettre l'écran à la vertical et fixer les autres vis dans leur emplacement



4

Branchez les câbles à l'écran

MISE EN MARCHE DE LA MACHINE



Attention !!

Pour une installation sûre et correcte du produit, avant toutes opérations, vérifier que vous vous situez dans un endroit sec et sécurisé.

1

Branchement de la connectique qui sort de la potence

